

zu beziehen bei
sold by
www.conatex.com



LCD-Digitalstoppuhren STRATOS

Zeitmeßbereich: 9 h, 59 min., 59 sec., 99/100 sec.

Zeitmeßeinheit: 1/100 sec.

Einsatzbereich: - 10° C bis + 55° C

Batterie: Knopfzelle 1,55 V, Type 389

Batterie einlegen: Batteriefach auf der Gehäuse-
rückseite mit einer Münze öffnen.
Batterie herausklopfen.
Neue Batterie mit Plus-Pol nach
oben einsetzen.
Deckel wieder schließen.

Betriebsdauer: ca. 1 Jahr
mit einer guten Batterie.




STRATOS 1 + STRATOS 2

zu beziehen bei

sold by

www.conatex.com

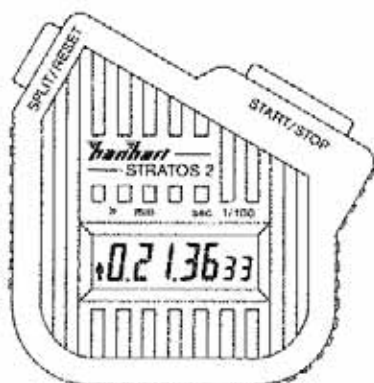

Nullstellung: Druck auf Taste *Reset*
(*Split / Reset*)

Start / Stop

Start: Druck auf Taste *Start / Stop*

Stop: Druck auf Taste *Start / Stop*

Nullstellung: Druck auf Taste *Reset*
(*Split / Reset*)

Addition

Start: Druck auf Taste *Start / Stop*

Stop: Druck auf Taste *Start / Stop*
Zeitmessung ist unterbrochen,
Symbol  in der Anzeige.
Wiederholung *Start / Stop*
beliebig oft möglich.

Nullstellung: Druck auf Taste *Reset*
(*Split / Reset*)

zu beziehen bei
sold by
www.conatex.com



STRATOS 2

- Split:** Zwischenzeiten
- Start:** Druck auf Taste *Start/Stop*
- Zwischenzeit I:** Druck auf Taste *Split/Reset*
Zwischenzeit wird eingeblendet.
Die Zeit läuft intern weiter –
Kennzeichnung durch Symbol  in der Anzeige. Bei einem
weiteren Druck auf Taste
Split/Reset
- Zwischenzeit II:** Druck auf Taste *Split/Reset*
Vorgang wie bei Zwischenzeit I –
kann beliebig oft wiederholt
werden.
- Stop:** Druck auf Taste *Start/Stop*.
In der Anzeige erscheint das
Symbol  für die Abstopfung
und die Endzeit.
- Nullstellung:** Druck auf Taste *Split/Reset*
- Dualzeit:** Messung von zwei kurz aufein-
anderfolgenden Zeiten.
- Start:** Druck auf Taste *Start/Stop*
- Zeit I:** Druck auf Taste *Split/Reset*
- Zeit II:** Druck auf Taste *Start/Stop*
- ablesen:** Zeit I ist sofort von der Anzeige
ablesbar. Symbol  
Zeit II = Druck auf Taste
Split/Reset
Symbol 
- Nullstellung:** Druck auf Taste *Split/Reset*